



1

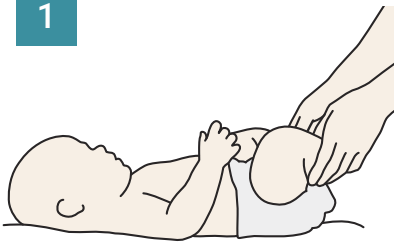


- သင် လိုအပ်ပါလိမ့်မည် -
 1. ဤညွှန်ကြားချက်များ၊
 2. သင့်ကလေးအနီးစ တို့ဖတ်ယူရန် ပစ္စည်းများ၊ နှင့်
 3. ဘောပင်တစ်ချောင်း
- သင့်ကလေး၏ ညစ်ပေးနေသော အနီးစ ကို လဲပေးပါ
- သင့်ကလေးကို ဘေးကင်းသည့် အနေအထားဖြင့် ပြန်လည်ထားရှိပေး ချိန်အထိ (ဥပမာ - ပုခက်ထဲ) ညစ်ပေးနေ သော အနီးစကို တစ်ဖက်တွင်ထားထား ပါ။

2

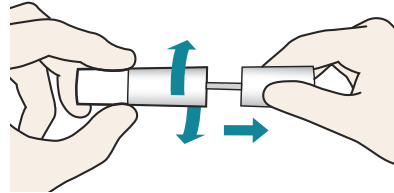


- ခိုင်မာသော မျက်နှာပြင်တစ်ခုပေါ် တွင် ညစ်ပေးနေသော အနီးစကို ဖွင့် ပါ
- ပြန်ကိုလှည့်ဖွင့်ပြီး ဆွဲထုတ်လိုက်ပါ က တို့ဖတ်ထိပ်ဖျားကို တွေ့ရပါမည်
- တို့ဖတ်ထိပ်ဖျားကို သင့်အရေပြား သို့မဟုတ် အခြားမျက်နှာပြင်တစ်ခုခု နှင့် ထိတွေ့ခြင်းမရှိစေရန် သတိထား ပါ

3

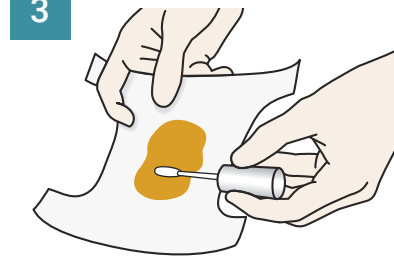


- တို့ဖတ်ထိပ်ဖျားကို ညစ်ပေးနေ သော အနီးစမှ မစင်အနည်းငယ် ယူရန် ခပ်ဖွဖွ ထိပါ
- တို့ဖတ်ထိပ်ဖျားကို အနီးစနှင့် တိုက်ရိုက်မထိမိစေရန် ကြိုးစား ပါ

4

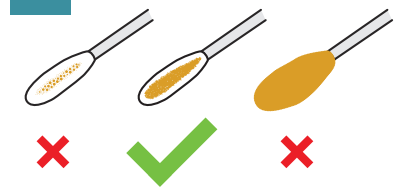


- မစင်အမြောက်အမြားမယူပါ နှင့်
- တို့ဖတ်ထိပ်ဖျားတွင် အရောင် အနည်းငယ် စွန်းသွားရုံသာ လိုအပ်ပါသည်

5

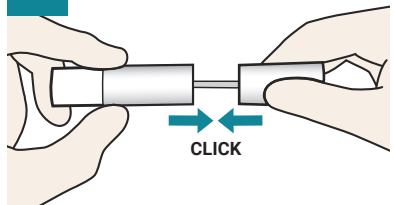


- တို့ဖတ်ထိပ်ဖျားကို ပြန်ထဲသို့ တည့်တည့်ပြန်ထည့်ပါ
- တို့ဖတ်ထိပ်ဖျားကို သင့်အရေပြား သို့မဟုတ် အခြားမျက်နှာပြင် တစ်ခုခုနှင့် မထိပါစေနှင့်
- ပြန်ကို တင်းကျပ်စွာဖိပိတ်ပါ

6

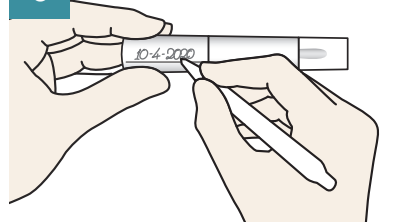

- ပြန်ပေါ်တွင် 'Date Collected' ဟု ရေးထားသည့်နေရာတွင် နေ့စွဲ ကို ရေးပါ

7

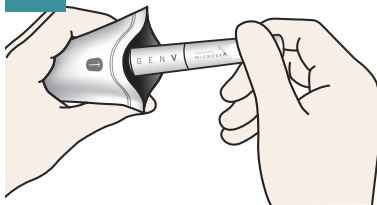


- ပြန်ကို အဖြူရောင်အိတ်ထဲသို့ ထည့်ပါ
- တက်နိုင်သမျှ လေအနည်းဆုံး ဖြစ်စေရန် အိတ်အစွန်းများကို ဖိ၍ပိတ်ပေးပါ

8




- အဖြူရောင်အိတ်ကို ပြန်စာပို့သည့် ငွေရှင်းပြီးသား စာအိတ်ထဲတွင် ထည့် ပါ
- စာအိတ်ကို အလုံပိတ်ပါ
- ၎င်းကို အခန်းအပူချိန်တွင် ထား နိုင်သည် (ရေခဲသေတ္တာ သို့မဟုတ် အအေးခန်းတွင် မထားရပါ)

9

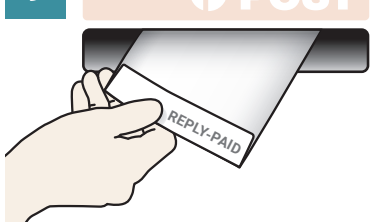

- စာအိတ်ကို GenV သို့ တစ်ပတ် အတွင်း သို့မဟုတ် တက်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံးပို့ပေးပါ - မည်သည့် ဩစတြေးလျစာတိုက် သေတ္တာ ထဲတွင်မဆို ထည့်နိုင်သည်။ တံဆိပ်ခေါင်းမလိုပါ

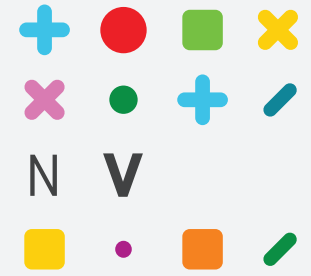

ကျွန်ုပ်တို့သည် ကလေးဘဝ ကျန်းမာရေးပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။

GenV အနီးစတို့ဖတ်ယူရန် ညွှန်ကြားချက်များ

သင့်ကလေး၏ မစင်နမူနာယူခြင်း

- သင် မစတင်မီ

- ကျေးဇူးပြု၍ ဤညွှန်ကြားချက်များကို ဖတ်ရှုပါ
- ရက်သတ္တပတ်တစ်ပတ်အောက်အရွယ် ကလေးငယ်ဖြစ်ပါသလား။ အသက် 7 ရက်အရွယ် သို့မဟုတ် ၎င်းရက်နောက်ပိုင်း သင်တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး နမူနာ ညစ်ထုတ်ယူပါ
- ရက်သတ္တပတ်တစ်ပတ်အထက်အရွယ် ကလေးငယ်ဖြစ်ပါသလား။ သင်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံး နမူနာ ညစ်ထုတ်ယူပါ
- နမူနာညစ်ထုတ်ယူရန် မေ့သွားပါသလား သို့မဟုတ် ခက်ခဲနေပါသလား။ သင့်နမူနာကို အချိန်မရွေးပေးပို့ပါ - နမူနာတိုင်းအရေးကြီးပါသည်
- တို့ဖတ်ယူမည့်ပစ္စည်းများ ပျောက်သွားပါသလား သို့မဟုတ် အမှားအယွင်းတစ်ခု လုပ်မိပါသလား - ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ပါ -

ဖုန်း - 1800 436 888 ဝက်ဘ်ဆိုက် - www.genv.org.au