




GenV ਥੁੱਕ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ

**ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਆਪਣੇ ਥੁੱਕ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਟਿਊਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।**

ਹਰੇਕ ਟਿਊਬ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।



ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ X ਲਿਖੋ ਜੋ ਨਮੂਨੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।


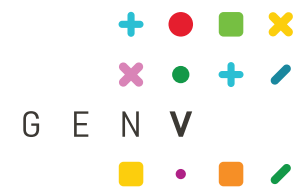


ਆਪਣੇ ਥੁੱਕ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣ, ਪੀਣ, ਸਾਗਿਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ?

1800 436 888  
www.genv.org.au

2D-PR-01022 (PA -Punjabi) Issue 1/2020-07

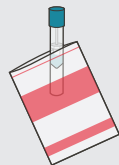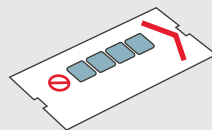

1 ਸਾਰੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

**ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ:** ਲੇਬਲ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਟਿਊਬ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।



2 ਜ਼ਿਪ-ਲੌਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰੋ।

3 ਸੀਲਬੰਦ ਬੈਗ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ-ਡਾਕਖ਼ਰਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਸੀਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

4 ਲਿਫਾਫਾ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ) ਕਿਸੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਪੋਸਟ ਦੇ ਡਾਕਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ।

AUSTRALIA  
POST

## ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ:



### ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ:

ਨਮੂਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣ, ਪੀਣ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਬੁੱਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਈ ਨੈਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਤਹ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ।

ਇਰਾਦਤਨ ਵਰਤੋਂ: ORAcollect®·Dx ਬਿਨਾਂ ਚੀਰੇ ਤੋਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ DNA ਨੂੰ ਅਲਹਿਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ FDA ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਣਵੀਂ ਤਸ਼ਖੀਸੀ ਉਪਯੋਗਾਂ (molecular diagnostic applications) ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਚੁਕਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ORAcollect·Dx ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਹਾਲਤਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਲੰਬੀ-ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੰਸ਼: ਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।


### ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ:

- ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ।
- ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ; ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਾਕਾਫੀ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ DNA ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋਸਟੇਮੀਆ (ਖੁਸ਼ਕ ਮੂੰਹ) ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਦਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨਾ ਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ DNA ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਵੈਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਜੇ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਰਲ ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਇਸਨੂੰ ਨਿਗਲੋ ਨਾ। [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com) 'ਤੇ MSDS ਦੇਖੋ।


ਸਟੋਰੇਜ਼: 15 | 25°C

### ਲੇਬਲ ਸੰਕੇਤਿਕਾ:


REF	ਕੈਟਾਲਾਗ ਨੰਬਰ
VD	ਬਣਾਵਟੀ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਡੀਵਾਈਸ
CE	CE ਮਾਰਕਾ
	ਨਿਰਮਾਤਾ
EC REF	ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
15°C   25°C	ਸਟੋਰੇਜ਼ ਬਾਬਤ ਹਿਦਾਇਤਾਂ
	ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ (ਵਰਤੋ)
LOT	ਲਾਟ ਨੰਬਰ

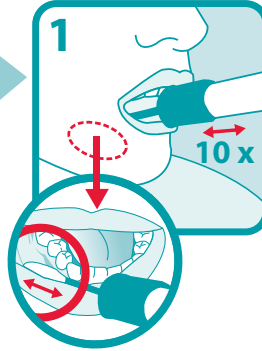


ਪੈਕੇਜ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੀ ਨੈਕ ਨੂੰ ਛੂਹੋ ਬਗੈਰ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਕੁ ਪਿਛੇ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਚਲੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜੋ (ਕਲੇਜ਼ ਅੱਪ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖੋ)। ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਮਸੂੜਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਵਾਰ ਰਗੜੋ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।

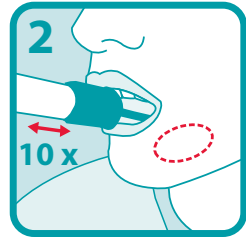


ਰਗੜਨ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਚਲੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 10 ਵਾਰ ਹੋਰ ਦੁਹਰਾਓ।

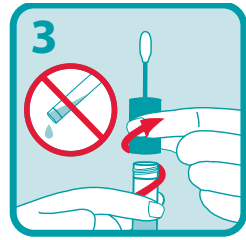

ਟਿਊਬ ਵਿਚਲੇ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਨੂੰ ਡੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪਕੜੋ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੂੰ ਛੂਹੋ ਬਗੈਰ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਟਿਊਬ ਤੋਂ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਤਾਰੋ।

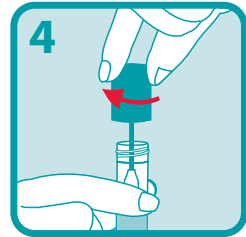

ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੂੰ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।

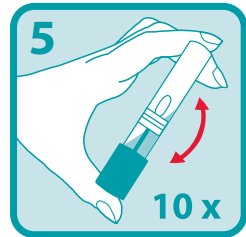

ਢੱਕਣ ਲੱਗੀ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰੋ ਅਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਿਲਾਓ।



ਬਣਾਵਟੀ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਖੀਸ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ



Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

**DNAGENOTEK™**

ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਮੂਨੇ

ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

■ DNA Genotek Inc.  
3000 - 500 Palladium Drive  
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

ਫੋਨ: +1.613.723.5757 • ਫੈਕਸ: +1.613.723.5057  
info@dnagenotek.com  
www.dnagenotek.com

\*ORAcollect, DNA Genotek Inc. ਦਾ ਪੰਜੀਕਿਰਤ ਵਪਾਰਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ DNA Genotek™ ਦੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦ ਸਾਰੇ ਤੁਰੰਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ, ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  
DNA Genotek ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਸਵੈਚ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟ-ਕਥਨ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com) ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਖੇਡੋ (www.dnagenotek.com/legalnotices)

© 2020 DNA Genotek Inc., ਜੋ OraSure Technologies, Inc. ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ।

PD-PR-01012 (PA -Punjabi) Issue 1/2020-06